

# NATURAL THE ONE: revoluția în stratificarea ceramicii

O singură masă pentru orice exigență de stratificare



Tressis Italia este de zeci de ani o asociație leader în domeniul dentar: prin noutatea tehnologică a căutat întotdeauna felul de a simplifica și de a ajuta arta tehnicodentară, promovând și propunând produse noi și de calitate.

Astăzi Tressis Italia prezintă un sistem de ceramică absolut revoluționar pentru stratificarea ceramicii pe metal: Natural The One.

Prin folosirea unei singure mase ceramice translucide se pot realiza restaurări complete. Cu această masă se poate acoperi toată gama a scarilor de culoare tradiționale.

De acum înainte nu mai este nevoie de dentină, de smalț, de transparent etc. etc.

Natural The One este disponibil în 2 variante separate, pentru a se putea adapta la toate aliajele dentare din comerț, fie pretioase sau nepretioase. Sistemul se prezintă așa:

-The One HT pentru aliaje tradiționale (CTE 500° C 13,8-14,9)

-The One LF pentru aliaje cu nivel ridicat de expansiune (CTE 500°C 16,2-16,7) Este o singură masă pentru stratificarea tuturor culorilor; studiată pentru restaurări posterioare.

Natural The One este o metodă simplă, rapidă, fidelă și constantă în rezultatul final. Natural The One simplifică lucrul zilnic de laborator.

Simplitatea modului de întrebuintare permite realizarea rapidă a ceramicii de bună calitate chiar și tehnicienilor mai puțin experți.

Să facem un exemplu practic, în care trebuie să realizăm 3 elemente de culoare diferită, un A3, un B3 și un C3: după ce s-a întins opacul corespunzător la scara de culoare dorită, se va stratifica o unică masă pentru toate cele 3 elemente.

Economia de timp și material este evidentă!

Cu Natural The One îmbunătățit timpul dumneavoastră în laborator.

Natural The One face parte din sistemul Natural Progressive Ceramic System care cuprinde ceramici de înaltă (Natural HT) și joasă (Natural LF) temperatură pentru metal și zirconiu (Natural ZIR). Cu gama de ceramică Natural se pot realiza incrustații, fațete și coroane integrale presate și stratificate.

Sistemul de ceramică Natural permite presarea pastilelor de ceramică fie pe metal fie pe oxid de zirconiu cu aceleași culori și același grad de opacitate. La ora actuală este cel mai complet sistem de ceramică italiană prezenta

## DOMENIUL DE UTILIZARE

Folosirea ideală a acestei metode este în punți și elemente diatorice (posterioare). Fiind foarte ușor de folosit Natural The One este avantajoasă fie pentru tehnicianul expert fie pentru cei la prima experiență. Numărul mic de mase necesare pentru lucru nu îngreunează cheltuielile laboratorului.

Procesul pentru a realiza restaurare în ceramică este foarte simplu:

1- pe capeta se întinde culoarea de opac dorită (fig.1)

2- se stratifică cu o singură masă dintelui în forma lui definitivă (fig.2)

3- la final se colorează cu supercoloranți CHROMA STAINS sau CHROMA STAINS LIGHT pentru tonalitățile mai deschise (fig.3)

4- astfel procedând, în puțin timp se obține un rezultat realist și de înaltă calitate (fig.4)

Tressis Italia s.r.l.  
Viale Italia 194  
31015 Conegliano (TV)  
Tel. 0438.418316  
Fax. 0438.426450  
[info@tressis.it](mailto:info@tressis.it)  
[www.tressis.it](http://www.tressis.it)

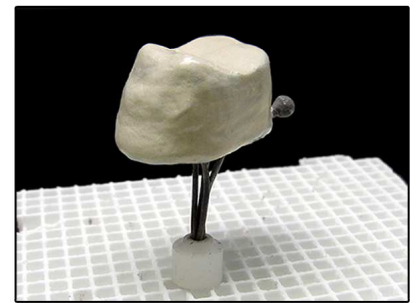


fig. 1

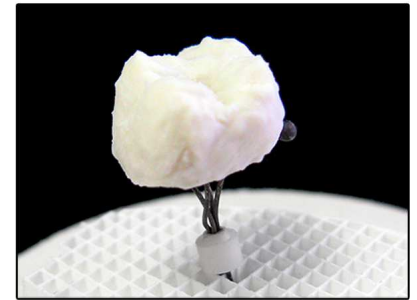


fig. 2


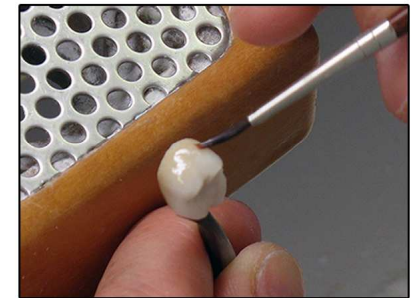


fig. 3

fig. 4

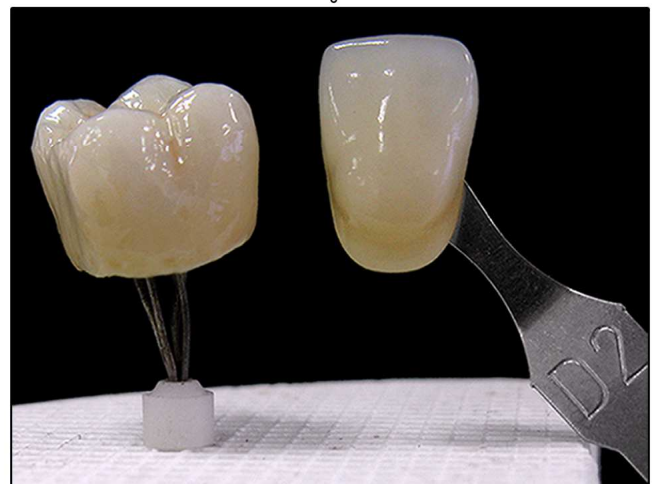

## Compoziția sistemului Natural The One

Colorazione A - D	A0	A1	A2	A3	A3,5	A4	A5	B0	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
OPAQUE PASTE	A0	A1	A2	A3	A3,5	A4	A5	B0	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
THE ONE	1	1	2	3	3	3	3	1	1	2	3	3	1	3	3	3	1	2	2
STAINS		A light	A light	A light	A	A	A		B light	B light	B	B	C light	C light	C light	C light	D light	D light	D light