

*ВОЛШЕБНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ ДЛЯ МОНОЛИТИЧЕСКИХ  
РЕСТАВРАЦИЙ ИЗ ЦИРКОНИЯ И ЛИТИЙ-СИЛИКАТА.*

- [www.naturalceramic.eu](http://www.naturalceramic.eu) - [www.naturalceramic.it](http://www.naturalceramic.it) - [www.naturalceramic.com](http://www.naturalceramic.com) - [www.naturalceramic.it](http://www.naturalceramic.it) -



DENTAL CERAMIC




ITALIAN STYLE

# Natural MAGIC★

## КЕРАМИКА В ГЕЛЕ ДЛЯ МИКРОШАРОВИДНОГО СЛОИСТОГО НАНЕСЕНИЯ

MAGIC★: керамическая паста низкой температуры для микрошаровидного слоистого нанесения на цирконии и литий-силикате (диапазон обжига: 790-950 °С).

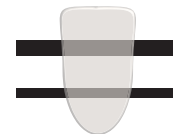

MAGIC★: может использоваться как на translucent и высокотranslucentной монолитной цирконии, так и на литий-силикате, прессованной и фрезерованной.

Перед началом работы рекомендуется оценить устойчивость цветовой интенсивности циркония, поэтому рекомендуется провести тестовый обжиг при 880°C и оценить устойчивость цвета циркония; при использовании на литий-силикате следует соблюдать параметры, указанные производителем.



MAGIC★: кремообразная, плотная и стабильная паста, подходящая как для работы кистью, так и для шпателем; после обжига обладает высокой прочностью, минимальной хроматичностью и высокой флуоресценцией.

REF 31 62 09 095

ТИП ПРОГРАММЫ	ВРЕМЯ СУШКИ	ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ	НАЧАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАДИЕНТ	НАЧАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА**	НАЧАЛО ВАКУУМА	КОНЕЦ***	ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ	ПРИМЕЧАНИЯ
	МИНУТЫ	МИНУТЫ	°С	°С/МИНУТЫ	°С	°С	°С	МИНУТЫ	
МЭДЖИК★ на ЛИТИЕВОМ СИЛИКАТЕ	2 - 4	2 - 4	400	45	790	450	790	2	ПРОГРАММА ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИТИЙ-СИЛИКАТА, БЕЗ ПЕРЕГРЕВА
МЭДЖИК★ на ЦИРКОНИИ	2 - 4	4 - 6	400	45	840 - 950	450	840 - 950	2 - 8+	ПРОГРАММА ТОЛЬКО ДЛЯ МОНОЛИТНОЙ ЦИРКОНИИ

**ТЕМПЕРАТУРА ЗАВЕРШЕНИЯ:** Не изменяйте этот параметр при обжиге литий-силиката; следуйте инструкциям производителя литий-силиката. При работе с циркониевыми конструкциями регулируйте температуру, чтобы избежать обесцвечивания циркония: при снижении температуры увеличивайте ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ, даже свыше 8 минут, для получения блестящей, гладкой и шелковистой поверхности.

**КОНЕЦ ВАКУУМА:** Вакуум прекращается при достижении ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАВЕРШЕНИЯ во время фазы нагрева, ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ должно осуществляться в атмосфере; для некоторых печей необходимо установить вакуумный выход на -1 °С относительно ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАВЕРШЕНИЯ.

**ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ:** Должно выполняться без вакуума.


Все значения являются ориентировочными и могут изменяться на  $\pm 20$  °С в зависимости от используемой печи, ее состояния, обновления программного обеспечения, количества элементов, выпекаемых вместе и так далее; рекомендуется провести тестовое обжигание перед началом работы и, при необходимости внесения каких-либо изменений, изменять значения по  $\pm 5$  °С за один раз.

# Natural MICRO-LAYER

## СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ КЕРАМИКИ NATURAL


### 1) МИКРО-СЛОИДНОЕ НАНЕСЕНИЕ

Восстановление из циркониевого оксида покрывается тонким слоем MAGIC★ равномерно по всей поверхности: толщина всего 0,1 - 0,2 мм уже достаточна для получения поверхности с высокой флуоресценцией, прозрачностью и живостью.

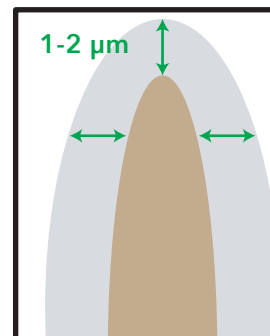


### 2) ПРОЗРАЧНОСТЬ

MAGIC★ улучшает прозрачность и рассеивание света внутри маленького слоя керамики, что визуально проявляется в высокой яркости и объемности восстановления, которое ранее казалось плоским и матовым.

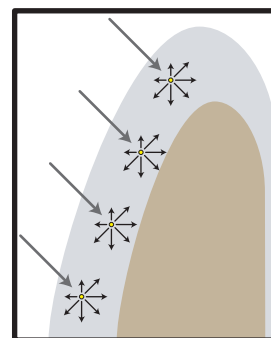


### 3) ХРОМАТИЧНОСТЬ

Суперцвета распределяют цвет внутри микро-слоя керамики, создавая тем самым высоко насыщенный и живой эффект. Суперцвета, нанесенные на поверхность, проникают в микро-слой керамики и усиливают её яркость, тепло и естественность.

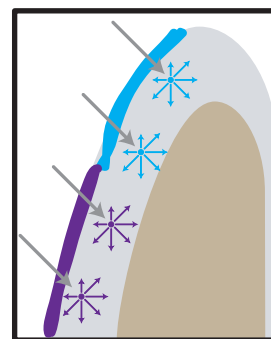

### 4) РАССЕЙВАНИЕ СВЕТА

Цветной свет рассеивается внутри микро-слоя керамики, создавая эффект полноты в дентиновой и шейной зонах, в то время как увеличенное проникновение света в режущей кромке увеличит эффект эмали, таким образом имитируя стратификацию керамики.

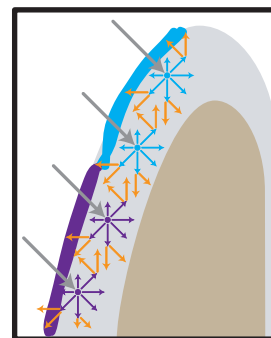

# Natural<sup>®</sup>

CERAMIC  
SYSTEM



Natural Ceramic System представляет собой самый полный спектр зубных керамических материалов для успешной работы вашей лаборатории.

Natural Ceramic System is the most complete range of dental ceramics for the success of your laboratory

DSL пластины из литиевого силиката для прессования.

DSL pressable lithium silicate ingots

HT керамика для традиционных сплавов, подходит для слоистой нанесения на сплавовую структуру и для полного керамического прессования.

HT ceramic for traditional alloys, suitable for layering on alloy frame and pressing full ceramic restorations

LF - керамика для универсальных сплавов, подходит для слоистой нанесения, прессования на сплавовую структуру и полного керамического прессования.

LF ceramic for universal alloys, suitable for layering and pressing both on alloy frame and full ceramic restorations.

ZiR специальная керамика для циркония и литиевого силиката для слоистой нанесения и прессования как на цирконий, так и на полноцерамическую структуру.

ZiR special ceramic for zirconia and lithium silicate for layering and pressing both on zirconia frame and full ceramic restorations.

STAINS универсальные светостойкие порошки и пасты для ярких и блестящих цветов, высокофлуоресцентные.

STAINS universal, bright and glossy, highly fluorescent powder and paste stains.

GLAZE FX - полная линейка глазурных материалов: порошки, пасты, флуоресцентные пасты и флуоресцентные спреи.

GLAZE FX a full array of glazing materials: powder, paste, fluorescent paste and fluorescent spray.

MASTER SET цветные массы для воспроизведения цветов A-D.

MASTER SET advanced shades for off-scale colors A-D

MONO-LAYER THE ONE это оригинальная мономассовая керамика для сплавов и циркония.

MONO-LAYER The One is the original mono-layer ceramic for alloys and zirconia

MICRO-LAYER специальные порошки и пасты для микро-слоистой нанесения на литиевый силикат и полноцерамическую циркониевую структуру.

MICRO-LAYER special powders and paste for micro-layering on lithium silicate and full contour zirconia

CRYSTAL полный набор специальных паст для микро-слоистой нанесения на цирконий, литиевый силикат и традиционные сплавы с керамикой.

CRYSTAL special ceramic pastes for micro-layering on zirconia, lithium silicate and traditional alloys-ceramic

Natural Ceramic System: зубная керамика в итальянском стиле.

Natural Ceramic System: dental ceramics, italian style

- [www.naturalceramic.eu](http://www.naturalceramic.eu) - [www.naturalceramic.it](http://www.naturalceramic.it) - [www.naturalceramic.com](http://www.naturalceramic.com) - [www.naturalceramic.it](http://www.naturalceramic.it) -

 TRESSIS ITALIA srl

viale Italia, 194  
31015 Conegliano (TV) ITALIA

Tel (+39) 0438 41 83 16

web [www.tressis.it](http://www.tressis.it)

email [tressisitalia@gmail.com](mailto:tressisitalia@gmail.com)



DISTRIBUTED BY:

