



SID DENTIN

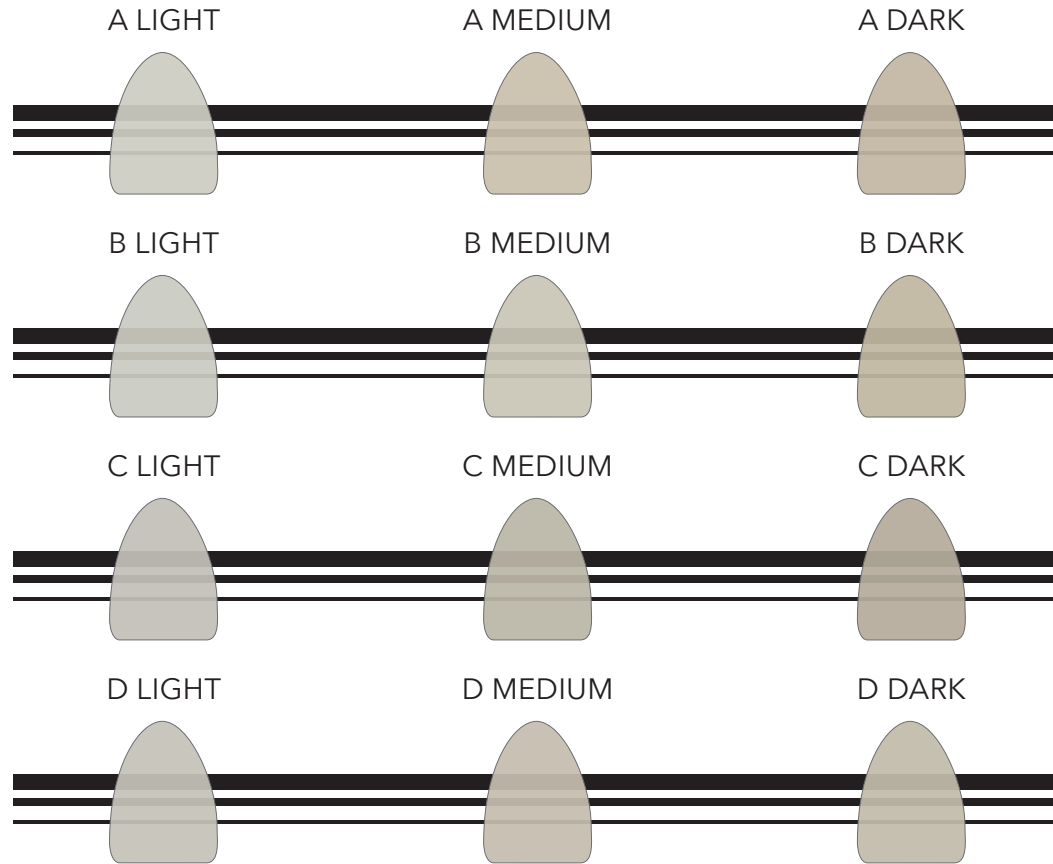

CUSPID DENTIN

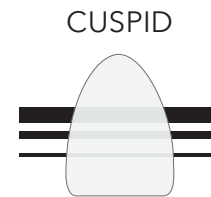

- www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it



Tressis Italia srl
 viale Italia 194, 31015 Conegliano (TV) ITALY
 TEL (+39) 0438 41 83 16 - FAX (+39) 0438 42 64 50
 Assistenza Tecnica Online (39) 347 944 28 60
 web: www.tressis.it - email: info@tressis.it

DENTAL CERAMIC

 ITALIAN STYLE

REF 00 TABUN 040 -1

<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">A0*</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>25% SID A LIGHT</td><td>75% CUSPID DENTIN</td></tr> </tbody> </table>	A0*		25% SID A LIGHT	75% CUSPID DENTIN	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">A1*</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>50% SID A LIGHT</td><td>50% CUSPID DENTIN</td></tr> </tbody> </table>	A1*		50% SID A LIGHT	50% CUSPID DENTIN	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">A2*</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>75% SID A LIGHT</td><td>25% CUSPID DENTIN</td></tr> </tbody> </table>	A2*		75% SID A LIGHT	25% CUSPID DENTIN	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">A3</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">100% SID A LIGHT</td></tr> </tbody> </table>	A3		100% SID A LIGHT		<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">A3.5</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">100% SiD A MEDIUM</td></tr> </tbody> </table>	A3.5		100% SiD A MEDIUM		<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">A4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>50% SID A MEDIUM</td><td>50% SID A DARK</td></tr> </tbody> </table>	A4		50% SID A MEDIUM	50% SID A DARK	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">A5</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">100% SiD A DARK</td></tr> </tbody> </table>	A5		100% SiD A DARK	
A0*																																		
25% SID A LIGHT	75% CUSPID DENTIN																																	
A1*																																		
50% SID A LIGHT	50% CUSPID DENTIN																																	
A2*																																		
75% SID A LIGHT	25% CUSPID DENTIN																																	
A3																																		
100% SID A LIGHT																																		
A3.5																																		
100% SiD A MEDIUM																																		
A4																																		
50% SID A MEDIUM	50% SID A DARK																																	
A5																																		
100% SiD A DARK																																		
<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">B0*</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>25% SID B LIGHT</td><td>75% CUSPID DENTIN</td></tr> </tbody> </table>	B0*		25% SID B LIGHT	75% CUSPID DENTIN	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">B1*</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>50% SID B LIGHT</td><td>50% CUSPID DENTIN</td></tr> </tbody> </table>	B1*		50% SID B LIGHT	50% CUSPID DENTIN	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">B2*</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>75% SID B LIGHT</td><td>25% CUSPID DENTIN</td></tr> </tbody> </table>	B2*		75% SID B LIGHT	25% CUSPID DENTIN	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">B3</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">100% SID B LIGHT</td></tr> </tbody> </table>	B3		100% SID B LIGHT			<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">B4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>50% SID B MEDIUM</td><td>50% SID B DARK</td></tr> </tbody> </table>	B4		50% SID B MEDIUM	50% SID B DARK	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">B5</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">100% SID B DARK</td></tr> </tbody> </table>	B5		100% SID B DARK					
B0*																																		
25% SID B LIGHT	75% CUSPID DENTIN																																	
B1*																																		
50% SID B LIGHT	50% CUSPID DENTIN																																	
B2*																																		
75% SID B LIGHT	25% CUSPID DENTIN																																	
B3																																		
100% SID B LIGHT																																		
B4																																		
50% SID B MEDIUM	50% SID B DARK																																	
B5																																		
100% SID B DARK																																		
	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">C1*</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>50% SID C LIGHT</td><td>50% CUSPID DENTIN</td></tr> </tbody> </table>	C1*		50% SID C LIGHT	50% CUSPID DENTIN	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">C2*</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>75% SID C LIGHT</td><td>25% CUSPID DENTIN</td></tr> </tbody> </table>	C2*		75% SID C LIGHT	25% CUSPID DENTIN	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">C3</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">100% SID C LIGHT</td></tr> </tbody> </table>	C3		100% SID C LIGHT			<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">C4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>50% SID C MEDIUM</td><td>50% SID C DARK</td></tr> </tbody> </table>	C4		50% SID C MEDIUM	50% SID C DARK													
C1*																																		
50% SID C LIGHT	50% CUSPID DENTIN																																	
C2*																																		
75% SID C LIGHT	25% CUSPID DENTIN																																	
C3																																		
100% SID C LIGHT																																		
C4																																		
50% SID C MEDIUM	50% SID C DARK																																	
		<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">D2*</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>75% SID D LIGHT</td><td>25% CUSPID DENTIN</td></tr> </tbody> </table>	D2*		75% SID D LIGHT	25% CUSPID DENTIN	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">D3</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">100% SID D LIGHT</td></tr> </tbody> </table>	D3		100% SID D LIGHT			<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">D4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>50% SID D MEDIUM</td><td>50% SID D DARK</td></tr> </tbody> </table>	D4		50% SID D MEDIUM	50% SID D DARK																	
D2*																																		
75% SID D LIGHT	25% CUSPID DENTIN																																	
D3																																		
100% SID D LIGHT																																		
D4																																		
50% SID D MEDIUM	50% SID D DARK																																	

*IMPORTANTE: a seconda del caso, è possibile utilizzare la massa BODY DENTIN al posto della CUSPID DENTIN per desaturare e diminuire la cromaticità delle masse SiD. Per aumentare la saturazione e la cromaticità è possibile utilizzare sia le masse CROMATIZER nella tonalità corrispondente, sia le masse SiD Dark.

ATTENZIONE: Tutti i valori riportati sono indicativi, le mescole possono variare secondo la sensibilità e le necessità del tecnico, per realizzare una colorazione omogenea quanto più fedele possibile, si consiglia di mettere le polveri NON umidificate all'interno di un recipiente vuoto ed asciutto (un vasetto di ceramica usato è l'ideale) quindi agitare molto bene il composto per un minuto. Estrarre quindi la polvere così ottenuta e utilizzarla secondo necessità.

ATTENZIONE: si consiglia di creare un campione ad hoc ogni qual volta si apportano modifiche e/o si vuole ottenere una tinta non riportata nell'elenco sovrastante.

- www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.it



Tressis Italia srl

viale Italia 194, 31015 Conegliano (TV) ITALY
TEL (+39) 0438 41 83 16 - FAX (+39) 0438 42 64 50
Assistenza Tecnica Online (39) 347 944 28 60
web: www.tressis.it - email: info@tressis.it

DENTAL CERAMIC

ITALIAN STYLE

REF 00 TABUN 040 -2